

有机合成装置

有机合成装置PPS-1510、2510型

该产品已获国家专利，专利号：200630099811.8 200620029739.6 200620029703.8

系统介绍

该装置为5连式合成装置，是用来开发新化学反应和催化剂，探讨反应的最佳条件及合成中间体等。以提高开发实验的效率。

每根试管设定不同的温度，就可以同时对比5种温度条件，因此可以高效率地完成合成。除了温度调节、搅拌以外，还具备有机合成必要的回流和空气置换机能，另外，通过变换铝片可以改变合成的进程。


实验完成以后，不需要将容器移出替换，可以通过液体抽出和浓缩来完成清理。

回流 试管添加 气体置换

因是通过冷媒进行强力冷却，可以使用滴管和定量滴管两种添加方式，另外在惰性条件下也可进行反应。气体置

所以可以近乎100%地回收 还可在惰性气体条件下进行固体试剂的添加。换是通过抽取真空和惰性气体加压进

反应液 可使用滴管等磨口制品。（磨口规格 ϕ 15/15）的。备有各式阀门，可任意选择试管。

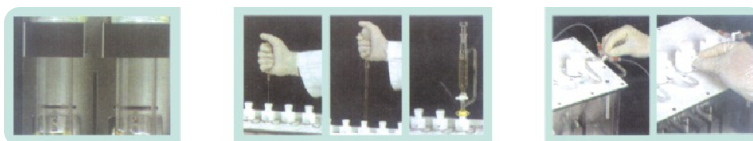

冷却循环 试管（1-5根）单独调温

冷却循环水管安插方便，试管可分别取出和放置，完成实验的试管 5根试管可同时在-10~150°C之间进行

可瞬间完成。可一根根取出，顺利地转换到下一程序。个别调温。也就是说5根试管的温度设定可以是各不相同的。在实验中

冷却装置和加热装置可同时使用。



有机合成装置

机能：

规格

温度设定：操作设定，数码显示。接液部材质：聚四氟

搅拌设定：操作设定，数码显示。冷却水接口：外径10.5mm

气体置换：真空吸引，惰性气体加压。实验管尺寸：φ 30×200H

还 流：高效率循环，瞬时拆装。搅拌子尺寸：φ 20×7H（一字型）

试药添加：可在惰性条件下也可以气体流动下添加。环境 温度：5-35℃

反应观察：直观、确认、颜色、反应状态、搅拌力度。重 量：23kg

安全对策：温度控制（x5）压力控制，安全控制。电源 输入：220V50Hz

型号	PPS-1510	PPS-2510
合成规模	1~4mlx5根	10~30mlx5根
搅拌方式	强磁力搅拌	
温度调节范围	-10~150℃（5×个别温调）※	
转速度范围	200~1600rpm(4ml水时)	250~1300rpm(30ml水时)
回流	可进行高效回流※	
试剂添加	利用吸管、滴管、定量滴管等添加试剂可以在惰性条件下进行固体试料的添加	

外形尺寸	430x270x460mm
电源	220V、50Hz·10A
加热功率	800W

- 若需要在室温以下的温度条件下进行合理反应时，需连接冷水循环装置。



图片上面的字去掉